


ALP K2

Línea de Equipo Médico

Tensiómetro de aneroides manual - Adulto

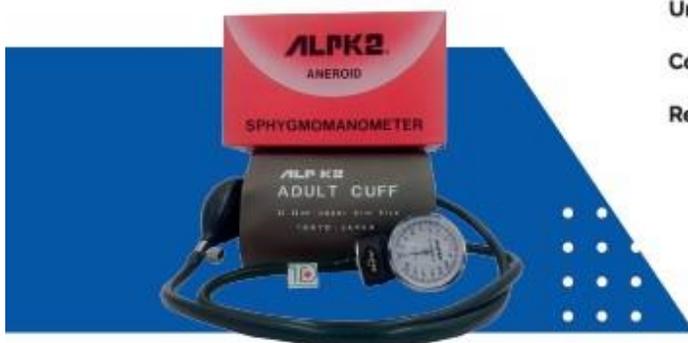

País de procedencia: Japón

Unidad de venta: Unidad

Código Imcolmedica: 01006500

Referencia: 500-V

Uso:

- Consultorios
- Prácticas clínicas universitarias
- Hospitales
- Clínicas
- Servicios de hospitalización, triage, consulta externa

Características:

- Uso en pacientes adultos.
- Cuenta con pera insufladora en goma.
- Válvula de liberación de aire.
- Estuche con cierre de cremallera.
- Brazalete tamaño adulto.
- Equipo con sistema de pinza en acero inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.

Aplicación:

- Equipo médico usado por profesionales de la salud o personas con conocimientos técnicos para la medición manual e indirecta de la presión arterial.

Especificaciones técnicas:

- Rango de medida: 20 a 300 mmHg
- Precisión \pm 3 mmHg
- Diámetro del medidor: 52 mm
- Dimensiones: Ancho 50 cm x alto 14 cm
- Bolsa interna: Látex
- Pera insufladora: Látex
- Sistema de presurización: Manual llenando la bolsa de caucho.
- Sistema de despresurización: Manual con la válvula.

Accesorios:

- Manómetro
- Brazalete de velcro con bolsa de latex
- Pera insufladora en goma con válvula
- Estuche con cierre de cremallera

Registro INVIMA:

- 2018DM-0018548